

ባለ አንድ የከረጢት ስርዓት

አቅርቦቶችን ይሰብሱ



ለጽዳት የሚሆን ከረጢት፣ የማስወገጃ ቦርሳ፣ ቲሹ እና/ወይም ጨርቅ እና ውሃ ይሰብሱ። እማራጭ፣ መቀሶች፣ መርፌ፣ የመለኪያ መመሪያ፣ መለዋወጫዎች።

ያገለገሉ የኪሳ ቦርሳ ስርዓትን ያሰወግዱ



የማጣባቂያውን ጠርዝ በጥንቃቄ ያንሱ እና ወደ ታች ይላጡ። ቆዳውን ከቆዳ መከላከያው ላይ ቀስ ብለው ይግፉት። ያገለገሉ ቦርሳዎችን በትክክል ያሰወግዱ። ሽንት ቤት ውስጥ አይጣሉ።

ንጹህ እና ደረቅ ቆዳ



በጤና ባለሙያዎ ምክር መሰረት ቆዳን በውሃ ወይም ቀለል ባለ ሳሙና ያጽዱ። በደንብ ይጠቡ እና ያድርቁ። በቆዳ ላይ ዘይት፣ ፓውደር፣ ሎሽን ወይም የሎሽን አይነት ሳሙና አይጠቀሙ።

የቆዳ ሁኔታን ይፈትሹ



በስቶማዎ (ፔሪስቶማዎ) ዙሪያ ያለው ቆዳ ያልቆሰለ፣ ሽፍታ ወይም መቅላት የሌለበት መሆኑን ያረጋግጡ።
*መቆሰል፣ ሽፍታ ወይም መቅላት ካስተዋሉ የእርስዎን WOC/NSWCC ነርስ ያነጋግሩ

የቆዳ መከላከያ እና ቦርሳ ያዘጋጁ



ከእያንዳንዱ የመከላከያ መተግበሪያ በፊት ስቶማውን በስቶማ የመለኪያ መመሪያ ይለኩ (ቅድመ መጠን ያለው የመከላከያ መክፈቻ ከተጠቀሙ ወደ ደረጃ 7 ይሄዱ)።



የተወሰነውን የመከላከያ ክፍተት መጠን በቆዳው ላይ ምልክት ያድርጉ። የቆዳ መከላከያው ቆዳ እና ስቶማ በሚገናኙበት ቦታ ላይ መግጠም አለበት። ልቅነትን እና የቆዳ መቆጣትን ለመከላከል በቆዳው መከላከያ እና በስቶማ መካከል ምንም አይነት ቆዳ እንደማይታይ ያረጋግጡ።



ትንንሽ የተጠማዘዙ መቀሶችን በመጠቀም ምልክቱን ተከትለው በቆዳው መከላከያ ላይ በጥንቃቄ ቀዳ ይፍጠሩ። የማጣባቂያው ሽፍታ ላይ ካለው መስመር በላይ አይቆረጡ። ቦርሳውን አትበሳ።



የማጣባቂያውን ሽፍታ ከቆዳ መከላከያው ያሰወግዱ።

ካሰፈለገ ማጣባቂያ ወይም ቀለበቶችን ያድርጉ




አሰፈላጊ ከሆነ የአጠቃቀም መመሪያዎችን በመከተል በመክፈቻው ዙሪያ የመከላከያ ቀለበት ወይም ቀጭን ማጣባቂያ ያድርጉ።

አዲሱን የከረጢት ስርዓት ይተግብሩ



የቆዳ መከላከያው ላይ ያለውን ክፍተት ስቶማውን መሃል አድርገው አስተካክለው ይለጥፉ።

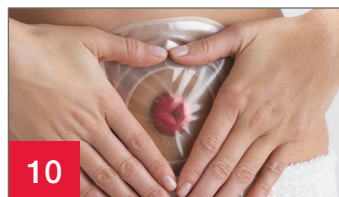


በተሻለ መንገድ ለማጣባቂያ ለአንድ ደቂቃ ያህል ቀለል ያለ ግፊት በቆዳው መከላከያ ላይ ይተግብሩ።



ዳርዳራቸው ማጠቃለያ ያለባቸው መከላከያዎች፣ በሁለቱም በኩል የጀርባ ወረቀቱን ያሰወግዱ እና ማጣባቂያውን በቆዳ ላይ በቀስታ ይጫኑ።



የከረጢቱን ታችኛውን ክፍል ይዘገ፡፡ ማስወገጃ ያለው ከረጢት ከተጠቀመ፣ በከረጢቱ ግርጌ ላይ የሚገኘውን ሎክ ኤን ሮል የማይክሮሴል መዝጊያውን ይዘገ፡፡ ይህንን የመዝጊያ ስርዓት በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የ ሎክ ኤን ሮል የማይክሮሴል መዝጊያ እንክብካቤ ጠቃሚ ምክር የሚለውን ይመልከቱ።

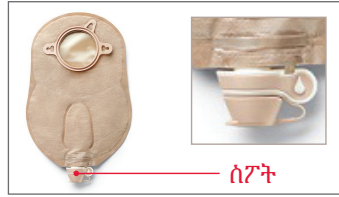

የ urostomy ከረጢትን ከተጠቀሙ፣ የፍሳሽ ሻልቭ መዘጋቱን ያረጋግጡ። በፍሳሽ ሻልቭ ላይ ያለው እንባ ጠብታ ምልክት ወደ ሰውነት በሚለጠፈው የ ከረጢቱ አካል ትይዩ መሆን አለበት። ፍላጎቱ ካልዎት፣ በ ሳጥን ውስጥ የቀረበውን ካፕ ይጠቀሙ።

ባለ አንድ የክረጢት ስርዓት

ጠቃሚ ምክሮች	የምርት ዝርዝር	የአክሲዮን ቁጥር
<ul style="list-style-type: none"> • በስቶማዎ ዙሪያ ያለው ቆዳ ምንም ዓይነት ሽፍታ ወይም ቁስሎች ምልክቶችን ማሳየት የለበትም • የተቆጣ ቆዳ በጤና እንክብካቤ ባለሙያ መገምገም አለበት። • የመከላከያ ቀለበት ወይም ማጣበቂያ የሚጠቀሙ ከሆነ፣ በ መመሪያው መሰረት ከስቶማ መክፈቻው አጠገብ ባለው ተጣባቂ የቆዳ መከላከያ ጎን ላይ ያድርጉት • ከቀድሞ ጥገና በኋላ ምናልባት ስቶማዎ ያብጥ ይሆናል። ስቶማው ወደ ቋሚ መጠኑ እስኪመለስ ድረስ ብዙ ሳምንታት ወይም ወራት ሊወስድበት ይችላል። • ሲያጸዱ ስቶማ ትንሽ ሊደማ ይችላል • የቆዳ መሽፈኛ ጊዜን ሊቀንስ ስለሚችል በተራዘመ የቆዳ መከላከያ ያማልበስ ሂደት ውስጥ የቆዳ መከላከያ መጥረጊያዎችን መጠቀም አይመከርም 	<p>ባለ አንድ የክረጢት ስርዓት _____</p> <p>መለዋወጫዎች</p> <p>የመከላከያ ቀለበቶች _____</p> <p>Ostomy ቀበቶ _____</p> <p>ማጣበቂያ _____</p> <p>የማለስለሻ ዲዮድራንት _____</p> <p>ስቶማ ፓውደር _____</p> <p>ሌላ _____</p>	

ተጨማሪ መመሪያዎች

ለምርት ጥያቄዎች፣ የሰውና ፍላጎቶች ወይም በአሜሪካ ውስጥ ያሉ ምርቶቻችንን በተመለከተ ዝርዝር ክሊኒካዊ ጥያቄዎችን ለማግኘት ወደ **1.888.808.7456 ይደውሉ**። በካናዳ ወደ **1.800.263.7400 ይደውሉ**።

www.hollister.com

የቆዳ መከላከያን ከመደረጉ በፊት ቆዳ ጎጂ ለሆነው ደረቅ መሆን አለበት።
 ከመጠቀም በፊት አጠቃቀምን፣ ግጭቶችን፣ ማሰጠንቀቂያዎችን፣ ጥንቃቄዎችን እና መመሪያዎችን በተመለከተ መረጃ ለማግኘት የአጠቃቀም መመሪያዎችን ማንበብን ያረጋግጡ።
 የ Hollister እርምጃ፣ Lock 'n Roll እና "Healthy skin" እዎንታዊ ውጤቶች። የሆሊስተር ኢንኮርፖሬትድ የንግድ ምልክቶች ናቸው።
 © 2018 Hollister Incorporated. 923069-1118 US-00667

