


## Sistema de bolsa de una pieza Pouchkins

### Materiales

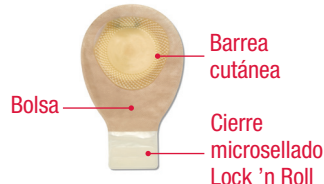

Bolsa colectora, tijeras, bolígrafo, agua y gasa, bolas de algodón o papel tisú.

### Preparación del sistema de bolsa



1 Mida el diámetro del estoma con una guía de medición de estoma antes de cada aplicación de barrera.




2 Trace el tamaño de la abertura determinada en la barra cutánea. La barra cutánea debe encajar en el punto de contacto entre la piel y el estoma. Compruebe que no se vea la piel entre la barra cutánea y el estoma para evitar fugas e irritación cutánea.



3 Retire la película de la bolsa de la barra cutánea. Con tijeras curvas pequeñas, recorte cuidadosamente una abertura en la barra cutánea para que coincida con el patrón. No corte por fuera de la línea sobre el papel antiadherente. No perforo la bolsa.

### Retire el sistema de bolsa usado

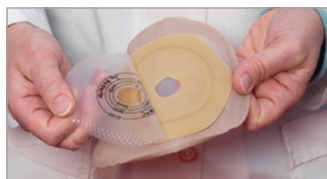

4 Retire el protector antiadherente de la barra cutánea. Déjela a un lado con el adhesivo hacia arriba.



5 Levante cuidadosamente un borde de la barra cutánea y despegúelo hacia abajo, desprendiendo la piel de la barra cutánea delicadamente. Deseche adecuadamente la bolsa usada. No la arroje por el excusado.

### Limpie y seque la piel



6 Limpie la piel con agua o con jabón suave según las indicaciones del profesional de la salud. Enjuáguela y séquela completamente. No aplique aceites, polvos, lociones ni jabones tipo loción sobre la piel.

### Aplique el nuevo sistema de bolsa



7 Centre la abertura de la barra cutánea alrededor del estoma.



8 Aplique una presión leve a la barra cutánea alrededor de un minuto para lograr una mejor adherencia.



9 Cierre el extremo de la bolsa. En caso de utilizar una bolsa drenable, cierre el extremo de la bolsa con el cierre microsellado **Lock 'n Roll**. Doble tres veces hacia arriba hasta que se unan las tiras plásticas. Presione con firmeza desde el centro hacia los bordes externos hasta la tira de cierre.



Válvula  
En caso de utilizar una bolsa para urostomía, cierre la válvula en la parte inferior de la bolsa.

## Sistema de bolsa de una pieza Pouchkins

### Uso de accesorios (según lo recomiende su profesional de la salud)



Puede aplicar pasta a la barrera cutánea antes de aplicarla.



Pueden utilizarse anillos para rellenar las zonas de piel cercanas al estoma como sustituto de la pasta.



Puede usar polvo para estoma cuando la piel esté lastimada y húmeda.

### Instrucciones adicionales

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Consejos



- La piel alrededor del estoma no debe estar irritada ni lesionada. Si la piel está irritada, póngase en contacto con una enfermera o un enfermero que se especialice en el cuidado de heridas (o lesiones), ostomía, continencia/terapia enterostomal.



- Los adhesivos **Pouchkins** (incluidos en cada caja) se pueden colocar en la bolsa para identificar la fecha y hora en que se cambió la bolsa.

### Información adicional

- **Cuidado de su hijo con ostomía** (manual educativo para padres y cuidadores de niños con ostomías)
- **¿Pueden seguir jugando y riendo?** (un libro para colorear para niños que quieran saber más sobre las ostomías)

Para solicitar una muestra, o si tiene consultas sobre el producto o preguntas clínicas específicas con respecto a nuestros productos en EE.UU., llame al **1.888.808.7456**. En Canadá, llame al **1.800.263.7400**.

Se recomienda hacer un seguimiento de rutina con un profesional de la salud.

Antes de usar cualquiera de los productos u accesorios de ostomía, asegúrese de leer todas las etiquetas y los prospectos del producto para conocer las indicaciones, contraindicaciones, riesgos, advertencias, precauciones e instrucciones de uso.



**Hollister Incorporated**  
2000 Hollister Drive  
Libertyville, Illinois 60048  
1.800.323.4060

[www.hollister.com](http://www.hollister.com)

**Hollister Limited**  
95 Mary Street  
Aurora, Ontario L4G 1G3  
1.800.263.7400